



Calzature
Officina Ortopedica
Sanitaria



PRIMO CECILIA S.r.l.
RIETI
TEL. 0746.271753



calzatura

primo diab

Calzatura Diabetica

La nostra calzatura diabetica propone un fondo studiato con una rullata del passo completa, che elimina la frizione della metatarso-falangea.

Il fondo sposta il baricentro corporeo riferito all'asse del piede sotto l'articolazione chopard per evitare il sovraccarico continuo della metatarso-falangea.

La lavorazione comprende una fodera interna completa termoformabile (se necessario) mantenendo sempre la fodera interna, quindi a contatto del piede, in pelle.

Tutti i materiali in premonta sono di natura vegetale.

- Puntali - Contrafforti - Solette in premonta
- il fondo "PRIMO DIAB" è possibile sceglierlo "Semirigido" o "rigido", pervenienza primaria e secondaria





calzatura

primo diab





calzatura

primo diab





calzatura

primo diab





calzatura

primo diab





calzatura

primo diab





calzatura

primo diab





calzatura

primo diab




Ortesi Plantari per Piede Diabetico:

IMPRONTA DINAMICA o CALCO GESSATO

Lavorazione a decompressione con schiuma a varie densità, lavorazione su calco con materiali ad alto assorbimento con varie densità ed elasticità.

Questi tipi di lavorazione permettono di avere un appoggio completo del piano plantare riequilibrando e scaricando completamente i punti di ipocarico/ipercarico evitando problemi di frizionatura e sostegno eccessivo. Retribuendo il carico su tutta la superficie plantare.



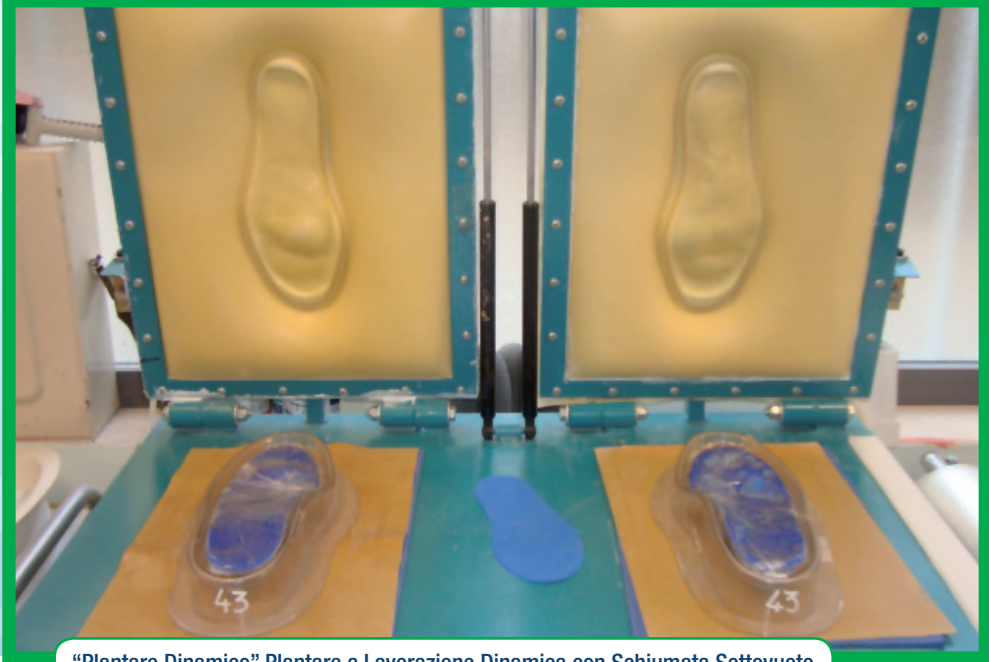

"Plantare Dinamico" Plantare a Lavorazione Dinamica con Schiumata Sottovuoto



"Plantare Dinamico" Plantare a Lavorazione Dinamica con Schiumata Sottovuoto



plantari



Impronta Dinamica



Rinforzi Fondo Rigido (Carbonio)



plantari





Plantari su Calco Gessato



Plantari su Calco Gessato



calzatura

su misura

La Calzoleria Artigianale

La calzoleria artigianale della "Primo Cecilia srl" vanta 100 anni di esperienza tramandata da padre in figlio, giungendo alla terza generazione di artigiani della calzatura. L'alta professionalità è arricchita dagli studi universitari e dai continui aggiornamenti riferiti alla tecnica ortopedica applicata per la progettazione e realizzazione dei presidi calzaturieri.

La lavorazione delle calzature è suddivisa in:

- Calzatura predisposta con calzate **NORMALE (senza plantare) / LARGE / EXTRALARGE**
- Calzatura su misura
- Calzatura diabetica con suola **"Semirigida"** e **"Rigida"** (Linea PRIMO DIAB)

Calzatura Predisposta: tutti i modelli illustrati nel catalogo è possibile ottenerli come calzatura predisposta con un minimo d'ordine di 3 paia. Le scelte dei fondi sono: F.do Cuoio, F.do Micro con tacco, F.do Zeppa e, se necessario, F.do Poliuretano o ITR.

Calzatura su misura: per la calzatura su misura utilizziamo una scheda tecnica di rilevazione misure o Vs. scheda lavorazione. La scelta dei pellami è molto ampia e le fodere sono implementabili con materiale termoformabile a decompressione morbida (gommapiuma), Setaflex, pelle elasticizzata e pellami di riporto tipo Cocco, Camoscio Stampato o Verniciato.





Sede di RIETI

Via Liberato di Benedetto, 42,A
Tel. 0746.496753 - 0746.271753 - Fax 0746.270768
e-mail: info@primoceccilia.it

Filiale di PASSO CORESE

Via Garibaldi, 56 - Tel. 0765.488169

Filiale di POGGIO MIRTETO

Via G. Matteotti, 85 - Tel. 0765.22380

Filiale di OSTERIA NUOVA

Viale Europa, snc - Tel. 0746.496753 - 271753

Filiale di BORGOROSE Fraz. CORVARO

Via S. Erasmo snc - Tel. 0746.271753